

מדריך מקוצר לשימוש בשלט הפעלה

לגירוי תור מוחי עמוק – DBS




הפעלת השלט

1. לחץ על הכפתור ההפעלה שנמצא בצד ימין למעלה.
2. לחץ על כפתור הבית פעמיים.


בחירת האפליקציה

לחץ על האפליקציה Patient Ctrl בתחתית המסך

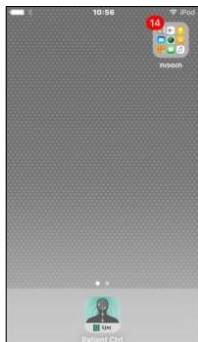

בחירת קוצב והפעלתו

במידה ומופיע מסך זה לחץ על שורת הקוצב ולחץ על שמך

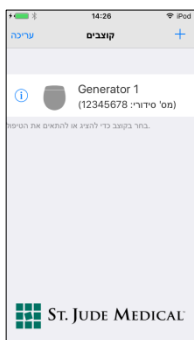


להפעלת הגירוי החשמלי

הטיפול מופסק

לחץ על הלחצן האדום (הקוצב יתחיל את פעילותו והלחצן יתחלף לירוק) הטיפול מופעל

★ להפעלה מהירה של הקוצב

הנח את המגנט על הקוצב למשך 2 שניות והרחק המגנט מהגוף.

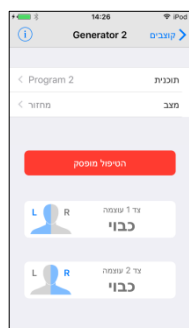


להפסקת גירוי החשמלי

הטיפול מופעל

לחץ על הלחצן הירוק (הקוצב יפסיק את פעולתו והלחצן יתחלף לאדום) הטיפול מופסק

★ לכיבוי מהיר של הקוצב

הנח את המגנט על הקוצב למשך 2 שניות והרחק המגנט מהגוף.

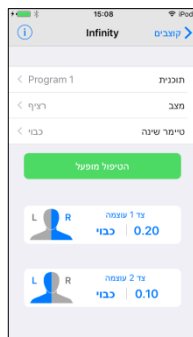

כיוון עוצמת הגירוי-באישור הרופא המטפל

עוצמה

- לחץ במסך על לחצן
- וסרת את עוצמת הגירוי על ידי לחיצה על לחצני ה + וה -
- ולחזרה לתפריט הראשי לחץ על "סיום".

החלפת תוכנית

- לחץ על שורת "תוכנית"
- דפדף בעזרת החצים או החלק אצבע לימין ושמאל לבחירת התוכנית הרצויה
- לסיום לחץ על לחצן **בחר תוכנית זאת**
- כאשר אתה בוחר תוכנית חדשה, עוצמת הגירוי תגדל בהדרגה ליעד העוצמה שנקבע עבור התוכנית שבחרת

חידוש הקשר בין השלט לקוצב

- לאחר מספר דקות בו לא נעשה שימוש בשלט הקישור בין השלט לקוצב מפסיק אך הגירוי ממשיך והינך מקבל טיפול.
- במידה והינך מעוניין לבצע שינוי לחץ על לחצן נסה שוב

אזהרות / הנחיות:

- ✓ אין לעבור דרך גלאי מתכות – מחשש לגירוי יתר או נזק למערכת, אנא הצג בפני המאבטח **כרטיס מושל**.
- ✓ במידה והינך מועמד לעבור הליך ניתוחי עליך ליצור קשר עם טכנאי החברה על מנת להעביר את הקוצב ל"**מצב ניתוח**". ולתת הנחיות מדויקות למנתח.
- ✓ נא לא לבצע עדכון גרסה של שלט ההפעלה, פעולה זו יכולה לשבש את פעילות הקוצב.

יש לפנות לרופא המטפל במקרים הבאים:

- ✓ במידה ומופיע חום, צמרמורות או הפרשה מוגלתית באזור הפצע.
- ✓ במידה והנך צריך לבצע את הפעולות הנ"ל : טיפול רפואי חשמלי, US הדמיית (אולטרא סאונד), טיפול קרינה, אקג, אולטרה סוניק וליטוריספיה בהספק גבוה (ריסוק האבנים).
- ✓ במידה והינך מועמד/ת לבדיקת MRI – עליך להתייעץ עם הרופא המטפל וטכנאי החברה על מנת שיאשרו את הבדיקה.

לשירות ותמיכה טכנית ע"י טכנאי החברה:

נדב אברמסון
אדי כהן
052-4830689
052-2302072

שעות פעילות: ימים א'-ה' 08:00 - 16:00

מדוגר מכשור רפואי בע"מ

כתובתנו: רח' הסדנא 8 א.ת. רעננה
למכתבים: ת.ד. 2566 רעננה 4365104
טל: 09-7401457 פקס: 09-7401459
Email: info@medogar.co.il

