


מדריך מקוצר לשימוש בשלט הפעלה - Eterna

מערכת השתלת אלקטרודה לשיכור כאב




הפעלת השלט

1. לחץ על הכפתור ההפעלה שנמצא למעלה או בצד ימין (תלוי בדגם)
2. לחץ על כפתור הבית.

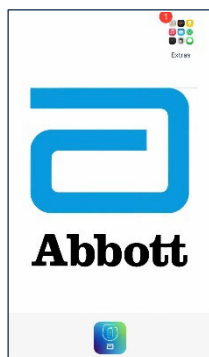


בחירת האפליקציה

לחץ על האפליקציה Patient Ctrl בתחתית המסך

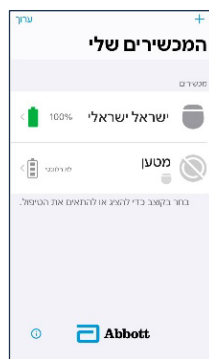

בחירת קוצב והפעלתו

במידה ומופיע מסך זה, לחץ על שורת הקוצב (לחץ על שמך)

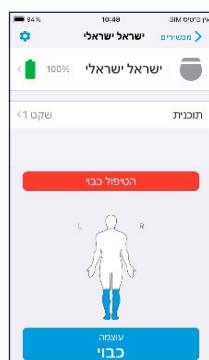


להפעלת הגירוי החשמלי

לחץ על הלחצן האדום (הקוצב יתחיל את פעילותו לרמת הגירוי שהוגדרה)

הטיפול מופסק

★ להפעלה מהירה של הקוצב

הנח את המגנט על הקוצב למשך 2 שניות והרחק המגנט מהגוף.

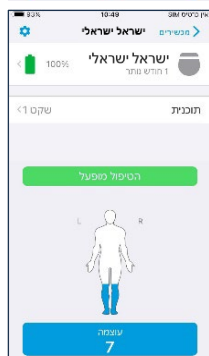

להפסקת גירוי החשמלי

לחץ על הלחצן הירוק (הקוצב יפסיק את פעולתו)

הטיפול מופעל


★ לכיוונו מהיר של הקוצב

הנח את המגנט על הקוצב למשך 2 שניות והרחק המגנט מהגוף.

כיוון עוצמת הגירוי

עוצמה

- לחץ במסך על לחצן עוצמה
- וסת את עוצמת הגירוי על ידי לחיצה על לחצני ה + וה -
- לחזרה לתפריט הראשי לחץ על "סיום".

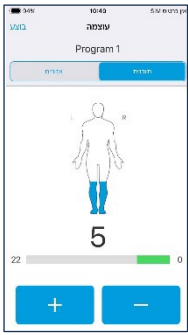


שינוי עוצמה באיזור מסויים

עוצמה

אזורים

- לחץ על לחצן עוצמה
- לחץ על לחצן אזורים
- בחר את האזור אותו אתה רוצה לשנות
- וסת את עוצמת הגירוי על ידי לחיצה על לחצני ה + וה -
- לחזרה לתפריט הראשי לחץ על "סיום".

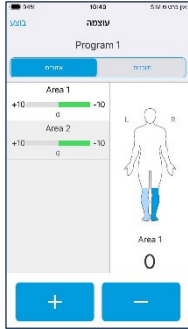

החלפת תוכנית

➤ לחץ על שורת "תוכנית"

- דפדף בעזרת החצים או החלק אצבע לימין ושמאל לבחירת התוכנית הרצויה
- לסיום לחץ על לחצן **בחר תוכנית זאת** ולאחר מכן הגבר עוצמה.
- בתוכנית שקטה (BURST) עוצמת הגירוי תעלה אוטומטית לרמת הגירוי שהוגדרה.
- ❖ במידה והפעלת תוכנית שקטה (BURST) השאר את הגירוי מתחת לסף התחושה.



אזהרות / הנחיות:

✓ **הקוצב המושתל בגופך הינו נטען ויש צורך להטעינו באופן קבוע על מנת לשמור על תקינותו.**
ראה הנחיות בספרון מערכת הטעינה לגבי אופן ההטענה והתדירות המתבקשת.

- ✓ אין להפעיל את המערכת בזמן נהיגה.
- ✓ אין לבצע תנועות חדות לאחר ההשתלה במשך 6-8 שבועות. (כגון התכופפות קדימה, מתיחות לצדדים, הרמת ידיים מעל הראש) מחשש לתזוזת האלקטרודה ממקומה ומגירוי יתר.
- ✓ שמור על אזור הפצע נקי ויבש. אין להרטיב את תחבושות הניתוח. ופעל לפי ההנחיות שקיבלת מהרופא המטפל.
- ✓ אין לעבור דרך גלאי מתכות מחשש לגירוי יתר או נזק למערכת. במידת הצורך, הראה את כרטיס המושתל שסופק לך.
- ✓ **במידה והינך מועמד לעבור הליך ניתוחי עלייך ליצור קשר עם טכנאי החברה על מנת להעביר את הקוצב ל"מצב ניתוח".**
- ✓ **במידה והינך מועמד/ת לבדיקת MRI – עלייך להתייעץ עם הרופא המטפל וטכנאי החברה על מנת שיאשרו את הבדיקה.**

יש לפנות לרופא המטפל במקרים הבאים:

- ✓ במידה ומופיע חום, צמרמורות או הפרשה מוגלתית באזור הפצע.
- ✓ אם אזור הגירוי אינו מכסה את מקום הכאב, או שתחושת הגירוי אינה יעילה.

לשירות ותמיכה טכנית ע"י טכנאי החברה:

נדב אברמסון 052-4830689

אמיר גורן 052-2997917

אדי כהן 052-2302072

שעות פעילות: ימים א'-ה' 08:00 - 16:00

MEDOGAR
MEDICAL EQUIPMENT LTD.



מדוגר
מכשור רפואי בע"מ

ADDRESS: HATAASIYA ST. 8
P.O. BOX 2566, RAANANA 4365504, ISRAEL
TEL 972 9 7401457 | FAX 972 9 7401459

www.medogor.co.il
info@medogor.co.il

כתובת: רחוב התעשייה 8, ת.ד. 2566, א.ת. רעננה 4365504
טל 09-7401457 | פקס 09-7401459
עוסק מורשה 512521311