


دليل مختصر لاستخدام جهاز التحكم لتشغيل Eterna

جهاز زرع قطب كهربائي لتسكين الألم



تشغيل جهاز التحكم عن بُعد

1. اضغط على زر التشغيل الموجود في الأعلى او على الجانب الأيمن (حسب طراز الجهاز)
2. اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

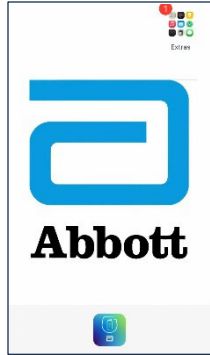

اختيار التطبيق

اضغط على التطبيق Patient Ctrl في أسفل الشاشة



اختيار جهاز الضبط وتشغيله

إذا ظهرت هذه الشاشة، فاضغط على سطر جهاز الضبط (اضغط على اسمك)



لتفعيل التحفيز الكهربائي

اضغط على الزر الأحمر (سيبدأ جهاز الضبط بالعمل لمستوى التحفيز الذي تم ضبطه)

★ لتشغيل جهاز الضبط بسرعة

ضع المغنطيس على جهاز الضبط لمدة 2 ثانية ثم أبعاد المغنطيس عن الجسم.



لإيقاف التحفيز الكهربائي


اضغط على الزر الأخضر (سيوقف جهاز الضبط عن العمل)

★ لتعطيل جهاز الضبط بسرعة

ضع المغنطيس على جهاز الضبط لمدة 2 ثانية ثم أبعاد المغنطيس عن الجسم.


اتجاه قوة التحفيز

- اضغط على زر على الشاشة قوة
- اضغط قوة التحفيز من خلال الضغط على زر
- للعودة إلى القائمة الرئيسية اضغط على "إنهاء".

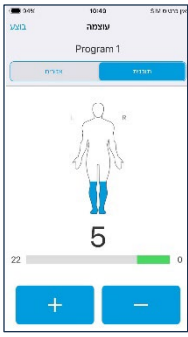

تغيير القوة في منطقة محددة

- اضغط على زر قوة
- اضغط على زر مناطق
- اختر المنطقة التي ترغب بتغييرها
- اضغط قوة التحفيز من خلال الضغط على زر
- للعودة إلى القائمة الرئيسية اضغط على "إنهاء".

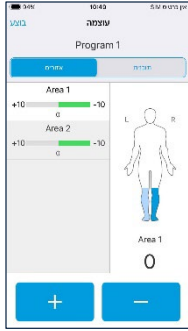

استبدال برنامج

- اضغط على شريط "برامج"
- تصفح باستخدام الأسهم أو امسح باصبعك نحو اليمين أو اليسار لتختار البرنامج المرغوب.
- للإنتهاء اضغط على زر البرنامج هذا اختر ثم ارفع القوة.
- في برنامج صامت (BURST) ترتفع قوة التحفيز تلقائياً إلى مستوى
- ❖ إذا شغلت برنامج صامت (BURST) فاترك التحفيز تحت عتبة الإحساس.



تحذير/تعليمات:

- ✓ جهاز الضبط المزروع في جسمك هو جهاز قابل للشحن ويجب شحنه بشكل دائم للحفاظ على سلامة عمله .
- ✓ كتيب نظام الشحن بخصوص طريقة وتكرارية الشحن المطلوبتان .
- ✓ لا يجوز تشغيل نظام الحن أثناء سيطرة السيارة.
- ✓ لا يجوز القيام بحركات مفاجئة وسريعة بعد الزرع لمدة 6-8 أسابيع (مثل الانحناء إلى الأمام، بسط الأطراف للجانبين ، رفع الأيدي فوق الرأس) وذلك خشية تحريك الأقطاب الكهربائية من مكانها وخشية حدوث تحفيز مفرط .
- ✓ احفظ منطقة الجرح نظيفة وجافة . لا يجوز تبليل ضمادة العملية . تصرف تبعاً للتعليمات التي تلقيتها من الطبيب .
- ✓ لا يجوز العبور في جهاز الكشف عن المعادن خشية ارتفاع مستوى التحفيز أو التسبب بضرر للنظام . أبرز بطاقة الزرع التي استلمتها اذا اقتضت الحاجة.
- ✓ إذا كنت على وشك الخضوع لإجراء جراحي فعليك الاتصال بخبير الشركة الفني لكي يقوم بتحويل جهاز الضبط إلى "حالة جراحية".
- ✓ إذا كنت على وشك الخضوع لفحص - MRI فعليك استشارة الطبيب وخبير الشركة لكي تحصل على موافقتهم على إجراء الفحص.

يجب مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

- ✓ إذا ظهرت حرارة، قشعريرة أو إفراز فيحي من منطقة الجرح.
- ✓ إذا كانت منطقة التحفيز لا تغطي موضع الألم أو إذا كان الإحساس بالتحفيز غير مفيد.

للخدمة والدعم الفني من خبير الشركة:

نداف أفرامسون 052-4830689
أمير جورن 052-2997917
إدي كوهن 052-2302072
ساعات الدوام: الأحد - الخميس 08:00 - 16:00

MEDOGAR
MEDICAL EQUIPMENT LTD.



מדוגר
מכשור רפואי בע"מ

ADDRESS: HATAASIYA ST. 8
P.O. BOX 2566, RAANANA 4365504, ISRAEL
TEL 972 9 7401457 | FAX 972 9 7401459

www.medogar.co.il
info@medogar.co.il

כתובת: רחוב התעשייה 8, ת.ד. 2566, א.ת. רעננה 4365504
טל 09-7401457 | פקס 09-7401459
עוסק מורשה 512521311