


Краткое руководство по использованию пульта Eterna

Обезболивающая имплантируемая система

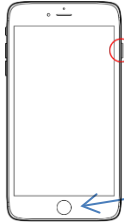

Включение пульта управления

1. Нажмите кнопку включения, расположенную сверху или справа (в зависимости от модели)
2. Нажмите кнопку перехода к главному экрану.



Выбор приложения

Нажмите на иконку приложения **Patient Ctrl** в нижней части экрана.



Выбор стимулятора и его активация

Если появляется следующий экран, нажмите на строку с названием стимулятора (нажмите на свое имя).



Активация электрической стимуляции

Нажмите на красную кнопку **Остановка терапии** (стимулятор начнет работу с заранее установленным уровнем стимуляции)

★ Для быстрой активации стимулятора

Приложите магнит к стимулятору на 2 секунды, а затем уберите магнит от тела.



Прекращение электрической стимуляции

Нажмите на зеленую кнопку **Терапия активирована** (стимулятор прекратит свою работу).


★ Для быстрой остановки стимулятора

Приложите магнит к стимулятору на 2 секунды, а затем уберите магнит от тела.



Настройка интенсивности стимуляции

- Нажмите на экране кнопку **Интенсивность**
- Отрегулируйте интенсивность стимуляции, нажимая на кнопки **-** и **+**
- Для возврата в главное меню нажмите «Завершить».

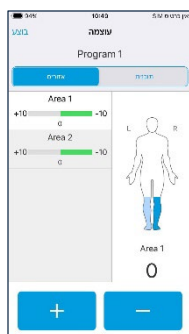

Изменение интенсивности в определенной зоне

- Нажмите на кнопку **Интенсивность**
- Нажмите на кнопку **Зоны**
- Выберите зону, в которой вы хотите изменить интенсивность
- Отрегулируйте интенсивность стимуляции, нажимая на кнопки **-** и **+**
- Для возврата в главное меню нажмите «Завершить».



Смена программы

- Нажмите на строку «Программа».
- Прокручивайте с помощью стрелок или проведите пальцем вправо или влево, чтобы выбрать нужную программу
- Для завершения нажмите кнопку **Выбрать эту программу**, а затем увеличьте интенсивность.
- В тихом режиме (BURST) интенсивность стимуляции автоматически поднимется до установленного уровня.
- ❖ Если вы активировали тихую программу (BURST), оставьте интенсивность ниже порога чувствительности.

Предупреждения / рекомендации:

- ✓ Встроенный в ваше тело стимулятор является перезаряжаемым. Стимулятор необходимо регулярно заряжать, чтобы сохранить его исправность. См. инструкции в брошюре о системе зарядки относительно способа зарядки и рекомендуемой частоты.
- ✓ Запрещено использовать систему во время вождения.
- ✓ Не совершайте резких движений в течение 6-8 недель после имплантации (например, наклоны вперед, растяжки в стороны, поднятие рук над головой) – это может привести к смещению электрода и чрезмерной стимуляции.
- ✓ Держите зону раны чистой и сухой. Не мочите повязки, наложенные после операции. Следуйте всем инструкциям, полученным от лечащего врача.
- ✓ Не проходите через металлодетекторы, так как это может привести к чрезмерной стимуляции или повреждению системы. При необходимости покажите карточку имплантированного устройства, которая была вам выдана.
- ✓ **В случае, если вам предстоит хирургическое вмешательство, вы должны связаться с техническим специалистом компании, чтобы перевести стимулятор в «хирургический режим».**
- ✓ **Если вам назначено обследование МРТ, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и техническим специалистом компании, чтобы они одобрили проведение обследования.**

Следует обращаться к лечащему врачу в следующих случаях:

- ✓ При появлении температуры, озноба или гнойных выделений в области раны.
- ✓ Если зона стимуляции не охватывает участок боли или ощущение стимуляции неэффективно.

Служба поддержки и техническая помощь от представителей компании:

Надав Абрамсон 052-4830689
Амир Горен 052-2997917
Эди Коэн 052-2302072

Часы работы: воскресенье – четверг: с 08:00 до 16:00

MEDOGAR
MEDICAL EQUIPMENT LTD.



מדוגר
מכשור רפואי בע"מ

ADDRESS: HATAASIYA ST. 8
P.O. BOX 2566, RAANANA 4365504, ISRAEL
TEL 972 9 7401457 | FAX 972 9 7401459

www.medogar.co.il
info@medogar.co.il

כתובת: רחוב התעשייה 8, ת.ד. 2566, א.ת. רעננה 4365504
טל 09-7401457 | פקס 09-7401459
נוסק מורשה 512521311